



ASP[®] ORIGINAL

Aguja de acupuntura semi-permanente

➡ Classic

➡ Gold

➡ Titanium



la referencia
en acupuntura
auricular

La aguja de los auriculoterapeutas

Creada en Francia en 1978 en base a los trabajos del doctor Paul Nogier, la Aguja Semi-Permanente de Sedatelec ha pasado a ser la referencia en materia de auriculoterapia. Varios años de investigación y perfeccionamiento de nuestro know-how permiten que la aguja ASP alcance hoy un nivel incomparable. El "clic" legendario ha pasado a ser garantía de una implantación perfectamente calibrada. El médico puede así tener total confianza en el producto y prestar toda su atención al paciente.

La ASP® ORIGINAL es un dispositivo estéril que permite implantar una pequeña aguja de 2 mm en el pabellón auricular. Está formada por un aplicador unitario que permite gran facilidad de instalación de la aguja, con excelente precisión.

Una presión calibrada permite generar el impulso necesario para la implantación. La forma de la aguja garantiza una buena resistencia sin riesgo de penetración total en los tejidos. Una vez implantada, la aguja puede ser protegida por una pastilla adhesiva suministrada con el dispositivo. Las características de la aguja ASP permiten alcanzar un efecto prolongado de tratamiento del punto auricular.

Durante su instalación, el médico no toca en ningún momento la aguja, cuya esterilidad se encuentra totalmente protegida por el inyector. El embalaje unitario permite al médico utilizar sólo algunos ASP de un blister, sin destruir la esterilidad de las agujas restantes.


Los plus de la ASP® ORIGINAL

Imán de estimulación

El inyector de las ASP Classic y Gold incluye en su extremo un imán bipolar especialmente diseñado para reactivar periódicamente el efecto de la aguja implantada. El inyector provisto del imán puede ser entregado con este fin al paciente.

Pastillas de sujeción

Las pastillas adhesivas suministradas con las ASP han sido fabricadas con un soporte microporoso y una masa adhesiva hipodérmica. Se utilizan si necesario para mantener la aguja en su lugar (puntos de borde).

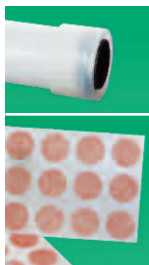

Modo de accion de la ASP® ORIGINAL

En la década de 1950, el doctor Paul Nogier estableció la correlación entre determinadas patologías y la sensibilidad a la presión de puntos específicos del pabellón de la oreja. Así nació la Auriculoterapia. Esta técnica utiliza la estimulación de puntos o zonas del pabellón de la oreja para restablecer el equilibrio fisiológico de los órganos o sistemas perturbados. Su eficacia se explica por la muy rica innervación del pabellón auricular y la presencia de numerosas conexiones con el sistema nervioso central.

La Aguja Semi-Permanente ASP ha sido diseñada especialmente para tratar esos puntos patológicos. Puede quedar instalada durante varios días en el pabellón de la oreja (10 a 20 días) y permite una estimulación durable de los puntos. Esta aguja, particularmente eficaz, se ha impuesto muy rápidamente como una herramienta terapéutica ideal para los auriculoterapeutas.

Indicaciones

Las principales indicaciones para utilizar las ASP son las algias permanentes, los trastornos psíquicos (depresión, angustia, vértigos, etc.), los trastornos funcionales crónicos y los trastornos adictivos (alcohol, tabaco, etc.).

Comercializadas desde hace 30 años, son utilizadas hoy diariamente por muchos médicos, hospitales y centros contra el dolor en el mundo entero.

Contraindicaciones

El tratamiento con auriculoterapia sólo debe ser aplicado después de un diagnóstico médico suficiente para determinar su validez.

Se evitará colocar una ASP a pacientes con problemas cutáneos en el lugar de la punción y en pacientes que portan prótesis valvulares.

Deben adoptarse precauciones para el tratamiento de mujeres embarazadas y pacientes hemofílicos o bajo tratamiento con anticoagulantes.

Tres metales para tres aplicaciones



La ASP Classic Aguja de ACERO INOXIDABLE sin NIQUEL

Esta aguja, estéril y desechable, ha demostrado su eficacia en los tratamientos de AURICULOTERAPIA desde hace más de 30 años.

La ASP Gold Aguja de acero recubierta de una película de ORO puro.

La ASP Gold se utiliza de preferencia en pacientes alérgicos.

La ASP Titanium Aguja de TITANIO macizo grado 4 médico.

Esta última versión en la gama ASP presenta un nivel máximo de biocompatibilidad. Se utilizará preferentemente en pacientes de riesgo: diabéticos, inmunodeficientes o que presentan alergias múltiples. Un paciente con ASP Titanium puede someterse a un examen de RMG.



Fabricación bajo constante vigilancia

Un producto bajo control

La ASP® ORIGINAL es moldeada, ensamblada y acondicionada en sala blanca estéril y conforme con los más estrictos estándares de calidad

Mecanizada y montada por máquinas automáticas, diseñadas por nosotros, la reproductibilidad de cada aguja es perfecta. Limpiada con ultrasonidos y desinfectada, ofrece una limpieza óptima antes de la etapa de esterilización.

Controles de presión, pruebas de extracción y un control de las agujas pieza por pieza al terminar el proceso de fabricación, permiten captar el menor defecto. Todo producto identificado no conforme da lugar a un análisis interno para mejorar nuestro proceso de fabricación.

Todas las informaciones útiles se encuentran presentes en los blísters, las cajas y el folleto de empleo. Se encuentra en particular el número del lote, que permite identificar el conjunto de los componentes y materiales utilizados para fabricar las agujas. Este trazado garantiza el origen de las materias primas y asegura un nivel de reactividad incomparable en caso de que usted encuentre algún problema al aplicarlas

Un ambiente controlado

La sala blanca en la cual se fabrican las agujas ASP es sometida a controles muy rigurosos que responden a las normas más estrictas.

Además, la ASP® ORIGINAL responde a todas las pruebas de biocompatibilidad actualmente vigentes. Un laboratorio independiente controla la tasa de contaminación microbiana.



Una esterilización adaptada

La esterilización por radiación gamma se encuentra perfectamente adaptada a los productos de salud. Ofrece una muy alta calidad de esterilización y permite una fecha de caducidad de 5 años.




Algunos ejemplos de protocolos

(extraídos de NATOM Auriculo)


Tratamiento anti-tabaco

2 ASP en homolateral en el punto O'
5 agujas de acupuntura
Puntos por personalizar en función del paciente

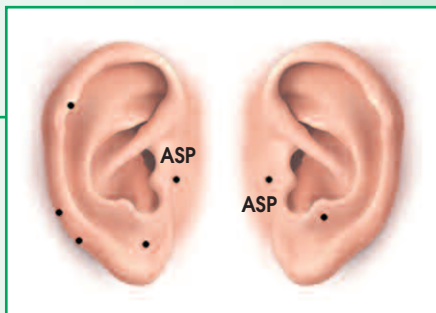


Rinitis alérgica

1 ASP en el punto de alergia
1 aguja de acupuntura en la zona del hígado 15'
2 agujas de acupuntura en homolateral sobre el punto olfativo

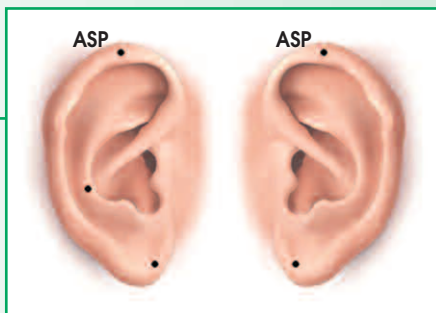

Neuralgia facial

1 ASP en el antitrago
1 aguja transfixante desde la zona del trigémino hasta el antitrago, pasando por el punto máxilo-dental
3 sesiones con 1 mes de intervalo

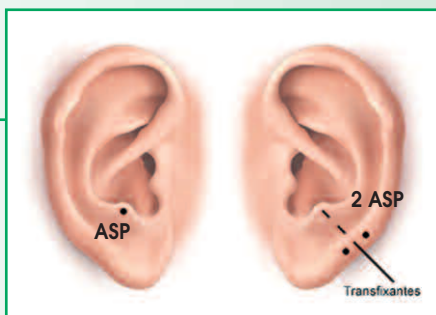

Si Ud. desea probar las ASP,
no dude en solicitarnos una TEST-BOX que
contiene 4 ASP Clásica, 4 ASP Gold y 4 ASP Titanium.

Un acondicionamiento adaptado a sus necesidades

Las agujas se encuentran acondicionadas de manera unitaria en blíster de 8 agujas. Están disponibles en 3 acondicionamientos:

La caja de 8 agujas,

Denominada Pack Solo,
Permite llevar consigo sólo algunas agujas.

La caja de 80 agujas

Es el acondicionamiento ideal cuando se inicia una formación en auriculoterapia o para el consumo moderado, en complemento con otras técnicas.

La caja de 200 agujas

Es la referencia y el formato mejor adaptado para los auriculoterapeutas. Esta caja exhibidor, que puede volverse a cerrar, protege y facilita el manejo de los blísters.

Una vez abierta la caja, se conserva la identificación del tipo de la ASP lo que es muy interesante para los médicos que utilizan los 3 tipos de agujas.

Todas las cajas incluyen pastillas adhesivas de protección y un folleto de modo de empleo.

Su revendedor:



Chemin des Mûriers • F-69540 Igny • Lyon • France
Tel. +33 (0) 472 663 322 • Fax +33 (0) 478 508 903
sedatelec@sedatelec.com
www.sedatelec.com